


温度調節装置取扱説明書  
型 Y H C 2 0 0 0  
(Ver1.00)

平成 1 2 年 1 2 月 2 4 日  
山下技研有限会社


## 概要

界面張力測定用恒温槽の温度調節装置として各種制御出力を保有している。  
温度調節装置は精密基準温度計で校正する事により 1 / 1 0 0 単位で設定できる。  
温度調節用出力電圧は 2 個のスライダーにより最適に可変可能で安定した水温を維持できる。温度調節器の設定変更により ON - OFF 制御と P I D 制御の何れかを選択可能。  
電子加熱冷却器用電源出力を装備している。

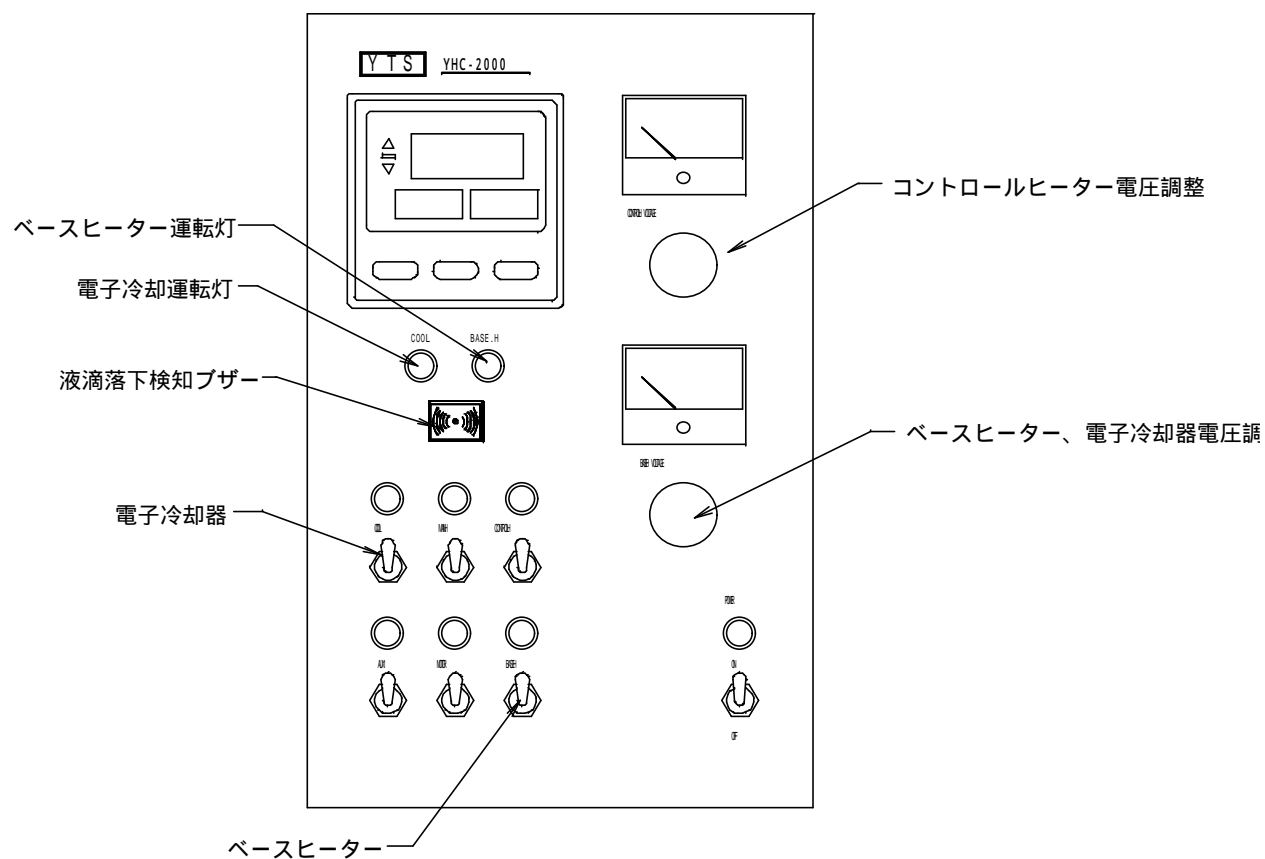

## 正面パネル

## 裏面パネル

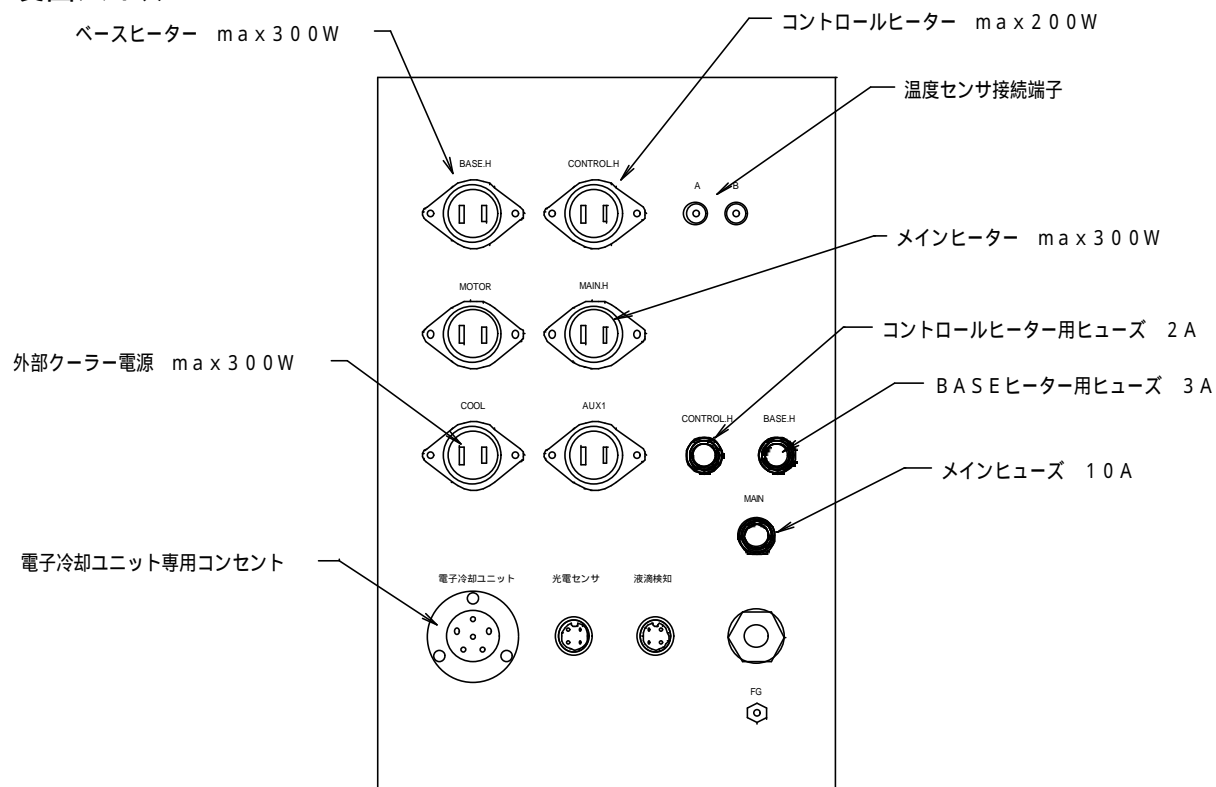

## 注意

指定レセプタクルに指定機器を接続する事。

電力の合計は15A以下。

ベースヒータは3A以下を厳守。

コントロールヒーターは2A以下を厳守。

## 仕様

温度調節範囲 (室温以上)	0 . 0 0 ~ 9 9 . 0 0 [    ]
温度指示誤差	調節器メーカー製造仕様のとおり
温度センサ	1 5 K    サーミスター型

## 外部出力

A C 1 0 0 V 固定	M O T O R P C S E N D M A I N . H
----------------	--

A C 0 ~ 1 0 0 V 可変	B A S E . H C O N T R O L . H
--------------------	----------------------------------

出力容量	各 3 A 以下、合計 1 5 A 以下 C O N T R O L . H のみ 2 A
------	--

ヒューズ	B A S E                      管型 3 A C O N T R O L                管型 2 A L I N E                      管型 1 5 A (全回路用)
------	---

操作スイッチ	各出力毎に O N _ O F F 出来る。
B A S E ヒーター	裏面パネル切り替えスイッチにて選択時のみ有効。
電子加熱冷却器	裏面パネル切り替えスイッチにて選択時のみ有効。
出力表示灯	操作スイッチ O N にて点灯
B A S E ヒータ表示灯	は裏面パネル切り替えスイッチにて選択時のみ有効。

## 制御出力内容

### 1) MAIN . H

用途 恒温水槽の予備昇温。

急速昇温用ヒーターを接続して恒温水槽温度を温度調節器の上限警報 ( A 1 ) で設定した温度まで昇温する。

動作 温度調節器の上限警報 ( A 1 ) ONにて出力禁止を保持。

MAIN . H操作スイッチをOFFにする事により保持解除する。

### 2) CONTROL . H

用途 恒温水槽の精密定温維持用。

定温維持用ヒーターを接続する。恒温水槽温度を温度調節器の操作出力で制御している。

動作 温度調節器の操作出力と連動する。

出力電圧はスライダーで定めた電圧。( 0 ~ 1 0 0 V )

### 3) BASE . H

用途 恒温水槽のベース温度維持用。

恒温水槽の温度を設定温度より僅かに低く設定す。

裏面パネルの切り替えスイッチをBASE側に設定している時に有効。

動作 出力電圧はスライダーで定めた電圧。( 0 ~ 1 0 0 V )

連続出力。

### 4) PC , SENS , MOTOR

用途 恒温水槽の付属機器用電源。

動作 出力電圧はAC 1 0 0 V固定。

連続出力。

## 使用方法

- 1．全操作スイッチをOFFにする。
- 2．使用する機器を目的に合せたパネル裏面出力コンセントに接続する。

( 接続例 )

CONTROL . H	1 0 0 Wヒーター ( 定温維持ヒーター )
BASE . H	3 0 0 W投げ込みヒータ ( ベース温度維持ヒーター )
MOTOR	恒温槽攪拌機
MAIN . H	3 0 0 W投げ込みシーズヒーター ( 急速昇温ヒーター )

- 3．温度調節器上限警報温度 ( A 1 ) を設定する。  
使用する出力の操作スイッチをONにする。
- 4．恒温水槽温度が温度調節器上限警報温度になりMAIN . Hの出力表示灯が消灯したらMAIN . H操作スイッチをOFFにする。
- 5．恒温水槽温度の変化が最も少なくなるようにスライダーを調節する。

## 連絡先

=====

〒771-0130 徳島市川内町加賀須野 511 番地 4

山下技研有限会社

代表取締役 山下 佑治

TEL(088)665-7907, FAX(088)665-7909

E-mail : yts@mwb.biglobe.ne.jp

URL <http://www.tcn.ne.jp/~yamashita/>

=====